
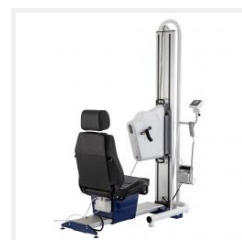


Angio cpet - mit automatischem Ständer

Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen

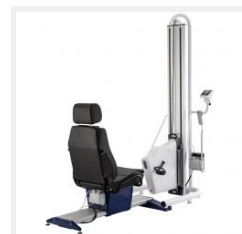

Highlights

Einfach zu bedienen

Für Lode-Produkte bedeutet dies:

- einfach zu verbinden
- leicht zu bewegen
- einfache Benutzeroberfläche

Zuverlässige und reproduzierbare Belastungstests

Die Erfahrung von Fachkräften zeigt, dass die Ergometer von Lode über den gesamten Watt- und Drehzahlenbereich besonders zuverlässig arbeiten und auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung innerhalb ihrer Spezifikationen bleiben.

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2015, and ISO 13485:2016 zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

Zusätzliche Funktionen mit PCU

Neben der Möglichkeit, 24 Protokolle leicht zu programmieren, bietet die Steuereinheit folgenden Funktionen:

- bessere Überwachung dank des zusätzlichen und größeren Displays
- eine perfekte Kombination mit BPM
- Möglichkeit der SpO2-Messung

Multifunktional

Das Ergometer kann sowohl für die Arm- als auch für die Bein-Ergometrie verwendet werden.



Angio cpet - mit automatischem Ständer



Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen

Mit dem Ständer für den Angio kann sich das Ergometer über eine Reichweite von 140 cm auf und ab bewegen. Mit dem Ständer ist es einfacher, Ihre Arm-Ergometrie-Einstellung in einen anderen Raum zu verschieben, da er frei stehen kann. Bei starker Beanspruchung während der Armergometrie wird empfohlen, den Ständer mit den mitgelieferten Teilen an der Wand zu befestigen. Wenn es nicht an der Wand befestigt ist, sollte der Ständer zusammen mit dem optionalen Stabilisierungsbein (Nr. 967815) installiert werden.

Zusammen mit dem automatischen Ständer wird der Angio zu einer ergometrischen Einheit, die sowohl für die Arm- als auch für die Bein-Ergometrie verwendet werden kann (diese Einstellung wird standardmäßig mit Handkrümeln geliefert). Aufgrund seines kompakten Designs ist es universell für ergometrische Studien in Bereichen geeignet, in denen die Standardergometrie nicht verwendet werden kann. Der Angio arbeitet unabhängig von der Trittgeschwindigkeit im Bereich von 7 - 1000 Watt. Der Angio cpet wird standardmäßig mit einem Kommunikationsmodul geliefert und kann daher von allen bekannten Stress-EKG- und Lungengeräten der Welt problemlos gesteuert werden. Die Arbeitslast, die Drehzahl und die Zeit können über das 3,5-Zoll-Farbdisplay ausgelesen werden.

Angio cpet - mit automatischem Ständer



Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen

Eigenschaften

**1
watt**

Kleine Einstellungsschritte

Die Arbeitslast der Lode-Ergometer kann in Schritten von nur 1 Watt eingestellt werden. Je nach Wunsch kann der Testbediener oder der Proband die Arbeitslast verändern. Die 1-Watt-Schritte können sowohl im manuellen Modus als auch innerhalb von Protokollen vorgenommen werden.

**7
watt**

Extrem niedrige Anfangslast

Dank der extrem niedrigen Anfangsbelastung von 7 Watt und der Verstellbarkeit in kleinen Schritten von 1 Watt ist das Ergometer hervorragend für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Die standardmäßige Steuereinheit zeigt mehrere Ergometerparameter, zudem können Sie Ihre Standardeinstellungen und Ihr Anfangsmenü selbst festlegen.



Über einen langen Zeitraum hinweg akkurat

Die Lode-Ergometer verfügen über einen elektro-magnetischen Bremsmechanismus von Lanooy (Wirbelstrom). Der größte Vorteil dieses Bremssystems im Vergleich zu einem Reibungsbremssystem ist, dass es präziser arbeitet. Darüber hinaus haben Reibungsbremssysteme mehr Verschleißteile.



LEM-kompatibel

Dieses Produkt kann mit der Software Lode Ergometrie Manager (LEM) verwendet werden, um Daten zu verwalten und bestimmte Protokolle anzuwenden wenn eine Communication Card vorhanden ist



LCRM-kompatibel

Dieses Produkt kann mit der Software Lode Cardiac Rehabilitation Manager (LCRM) verwendet werden



Kundenspezifische Display-Einstellung

Display-Einstellungen sind nach Ihren spezifischen Anforderungen einstellbar: Jeder einzelne hat seine spezifischen Wünsche dazu, welche Parameter angezeigt werden sollen. Dies lässt sich bei den Lode-Ergometern leicht anpassen.



Vielseitige Schnittstellen

Verschiedene Schnittstellenprotokolle sorgen für optimale Kommunikation mit allen üblichen Belastungs-EKG- und Spirometrie-Geräten

Lode















FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

Angio cpet - mit automatischem Ständer



Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen

Angio cpet - mit automatischem Ständer kann unter anderem mit folgenden Optionen erweitert werden:

<p>USB-Seriell-Adapter-Konverter</p> <p>Einfache Anbindung</p>  <p>Teilenummer: 226012</p>	<p>Elektrisch verstellbarer Sitz für Armergometer</p> <p>Komfortable Sitzposition vor dem</p>  <p>Teilenummer: 917813</p>	<p>SpO2 für Steuereinheit mit Touch-Control (extra Langes Kabel)</p> <p>Sauerstoff Sättigung</p>  <p>Teilenummer: 945822</p>	<p>RS232 Kabel</p> <p>Einfache Anbindung</p>  <p>Teilenummer: 930911</p>	<p>Steuereinheit mit 7" Touchscreen für Ergometer</p> <p>Übung manuell steuern</p>  <p>Teilenummer: 945834</p>
<p>Programmierbare Steuereinheit mit 7" Touchscreen für Ergometer</p> <p>Einfache Vorbereitung und Durchführung von</p>  <p>Teilenummer: 945835</p>	<p>SpO2 für Steuereinheit mit Touch-Control - im Nachhinein bestellt</p> <p>Im Nachhinein bestellt</p>  <p>Teilenummer: P945822</p>	<p>Extra breiter Zugang für Rollstühle</p> <p>Einfache Zugang</p>  <p>Teilenummer: 967805</p>	<p>Stabilisierungsfuss für Angio mit automatischem Ständer</p> <p>Optimale Sicherheit und Stabilität</p>  <p>Teilenummer: 967815</p>	<p>BT Herzfrequenz</p> <p>Herzfrequenz in einem extrem weiten Bereich</p>  <p>Teilenummer: 945833</p>
<p>Verstellbare Kurbeln</p> <p>Optimale Kraftanwendung</p>  <p>Teilenummer: 960804</p>	<p>Custom Pack Netzkabel 100 - 127 V für Ergometer</p> <p>Einfache Verbindung</p>  <p>Teilenummer: 945892</p>	<p>Pedalschuhe (Paar) für Corival (Recumbent)</p> <p>Zusätzliche Stabilität beim Fahren</p>  <p>Teilenummer: 967835</p>	<p>Pedalschuhe (Paar) für Corival (Recumbent) - zusätzlich bestellt</p> <p>Zusätzliche Stabilität beim Fahren</p>  <p>Teilenummer: P967835</p>	

Angio cpet - mit automatischem Ständer

Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen



Spezifikationen

Belastung

Drehmomentbereich	1-70 Nm
Mindestlast	7 W
Maximale Spitzenlast	1000 W
Mindest-Laststufen	1 W
Maximale Dauerlast	750 W
Hyperbolische Arbeitslast-Kontrolle	✓
Von der Maximaldrehzahl unabhängige konstante Last	150 rpm
Von der Mindestdrehzahl unabhängige konstante Last	30 rpm
Elektromagnetische Wirbelstrombremse	✓
Dynamische Kalibrierung	✓

Genauigkeit

Arbeitslast-Genauigkeit 7 bis 100 W	3 W
Arbeitslast-Genauigkeit 100 bis 500 W	3 %
Arbeitslast-Genauigkeit 500 bis 1000 W	5 %

Komfort

Einstellbarkeit Höhe	1400 mm
----------------------	---------

Benutzeroberfläche

Englische Benutzerschnittstelle	✓
Chinesische Benutzeroberfläche	✓
Kroatische Benutzeroberfläche	✓
Tschechische Benutzerschnittstelle	✓
Dänische Benutzerschnittstelle	✓
Holländische Benutzerschnittstelle	✓
Finnische Benutzerschnittstelle	✓
Französische Benutzerschnittstelle	✓
Deutsche Benutzerschnittstelle	✓
Griechische Benutzeroberfläche	✓
Ungarische Benutzeroberfläche	✓
Italienische Benutzerschnittstelle	✓
Japanische Benutzerschnittstelle	✓
Koreanische Benutzerschnittstelle	✓
Lettische Benutzeroberfläche	✓
Litauische Benutzeroberfläche	✓
Norwegische Benutzerschnittstelle	✓
Polnische Benutzerschnittstelle	✓
Portugiesische Benutzerschnittstelle	✓
Rumänische Benutzeroberfläche	✓
Russische Benutzerschnittstelle	✓
Spanische Benutzerschnittstelle	✓
Schwedische Benutzeroberfläche	✓
Türkische Benutzerschnittstelle	✓
Ukrainische Benutzerschnittstelle	✓
Auslesung Abstand	✓
Auslesung Drehzahl	✓
Auslesung Herzfrequenz	✓
Auslesung Ziel HF	✓
Auslesung Energie	✓
Auslesung Drehmoment	✓
Auslesung Zeit	✓
Auslesung Leistung	✓
Anzeige einstellen	✓
Widerstand einstellen	✓
P-Steilheit einstellen	✓
Modus einstellen	✓
Manueller Betriebsmodus	✓
Betriebsmodus voreingestelltes Protokoll	✓
Terminal-Betriebsmodus	✓
Externe Steuereinheit	✓
Betriebsmodus selbst eingestelltes Protokoll	✓

Angio cpet - mit automatischem Ständer



Modernes Ergometer mit vielseitigen Anwendungen

Maße

Produktlänge (cm)	84 cm	33.1 inch
Produktbreite (cm)	82 cm	32.3 inch
Produkthöhe	223 cm	87.8 inch
Produktgewicht	95 kg	209.4 lbs
Breite zwischen Ständer	67 cm	

Stromversorgung

V AC	100 - 240 V
Phase	1
Frequenz	50/60 Hz
Energieverbrauch	250 W
Netzkabel IEC 60320 C13 mit CEE 7/7 Stecker	✓
Netzkabel NEMA	✗

Normen & Sicherheit

IEC 60601-1:2012	✓
Konform mit ISO 13485:2016	✓
Konform mit ISO 9001:2015	✓

Zertifizierung

CE Klasse Im gemäss MDD 93/42/EEC	✓
CE-Klasse des Produkts mit optionalen SpO2	Ila
CE-Klasse des Produkts mit optionalen BPM	Ila
CB gemäss IECEE CB - anhängig	✓

Bestellinfo

Teilenummer: 967904

**Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*