


# Copy of LEM 10 - Módulo para la medición de la fuerza de pedaleo


Original  
Quality  
Option

Hace visible la fuerza del pedal

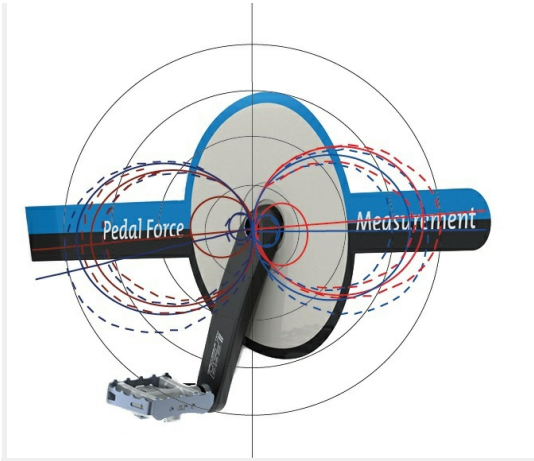

Hace visible la fuerza del pedal

Este módulo de ampliación permite la lectura de los datos obtenidos del hardware de la opción de Medición de la fuerza de pedaleo del ergómetro Excalibur Sport y Brachumera Sport de Lode. Ejemplos de estos otros datos son: fuerzas sobre la biela izquierda y/o derecha, visualizaciones polares, potencia del par y resultados de la fuerza según 2 grados, resultados del cálculo de la eficacia, máximo, mínimo, promedio y pico. Además de las visualizaciones adicionales en el campo de la medición de la fuerza de pedaleo, el módulo de ampliación Medición de la fuerza de pedaleo también ofrece la posibilidad de realizar un informe posterior con las estadísticas de los datos medidos. También cuenta con otras posibilidades para pruebas de análisis. Las áreas de interés se pueden definir con visualizaciones polares como izquierda y derecha promedio con desviaciones y como suma de la izquierda y derecha. N.B.: este módulo se incluye con el Excalibur Sport con medición de la fuerza de pedaleo y con el Brachumera Sport con medición de la fuerza de pedaleo.

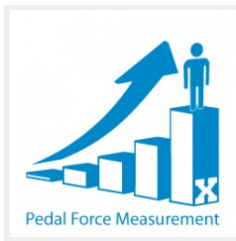

## Fácil de instalar

- Instalación sencilla paso a paso - configuración sencilla de los ergómetros - configuración sencilla de los sujetos



### Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las normas de calidad de la empresa Lode



### Modo isocinético de Excalibur y Brachumera

Se pueden programar fases isocinéticas para Excalibur y Brachumera.



### Compatibilidad con sistemas operativos LEM X

- Microsoft Windows 7 - Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows 10



### Menú de análisis sofisticado

Posibilidad de hacer zoom en los resultados y sincronizarlos con otros gráficos. Visualizar mejor el uso de la funcionalidad de las coordenadas x/y. Comparar varios resultados de prueba de un sujeto de prueba en un resumen claro o comparar a distintos sujetos de prueba realizando la misma prueba de ejercicios. Defina su propio informe de impresión



# Copy of LEM 10 - Módulo para la medición de la fuerza de pedaleo

Original  
Quality  
Option

Hace visible la fuerza del pedal

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 10



## Información del pedido

Número de parte: 955917

*\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*