

Portable Calibrator Ultra

Calibración sencilla y eficaz de los ergómetros



Reflejos

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto social y medioambiental. Todos los productos cumplen la norma RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los productos médicos cumplen la norma MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC 60601-1.

El Calibrator Ultra es una estación de calibración portátil fácil de configurar y muy precisa. La estación de calibración se controla mediante un PC u ordenador portátil. Con esta estación es posible controlar o calibrar todos los ergómetros existentes de forma precisa. El Calibrator de Lode se monta en el eje del ergómetro. El sistema está aprobado por un instituto independiente y se usa en los institutos de calibración de todo el mundo desde 1993. Se pueden hacer calibraciones hasta los 1500 vatios. Debido a las posibilidades que usted crea cuando usa un PC normal para calibrar el calibrador, puede imprimir un informe de calibración para su cliente o crear su propia base de datos de datos de calibración.

El Calibrator Ultra es una estación de calibración, fabricada por Lode, que le ayuda a profesionalizar sus calibraciones y a hacer su servicio más eficiente.

Tenga en cuenta que las especificaciones para 110 V son distintas de para 230 V.



Portable Calibrator Ultra

Calibración sencilla y eficaz de los ergómetros



Características



Calibración extremadamente precisa de los ergómetros

Con este producto, es posible una calibración muy precisa de los ergómetros

Herramienta profesional

Herramienta de mantenimiento profesional

Lode ofrece herramientas a los ingenieros de mantenimiento de los distribuidores que se dedican en exclusiva a sus productos y propósitos. Algunas se pueden usar incluso en actividades de calibración de otros fabricantes

Universal

Calibración universal

Esta herramienta se puede usar para la calibración de los productos de Lode, así como para productos de otros fabricantes

Múltiples conectores

Se dispone de conectores de eje para varios ergómetros

Se dispone de varios accesorios para conectar el calibrador a los ergómetros más disponibles



Conectividad por USB

USB para conectar el PC o los productos de ECG/ergoespiometría, para una conexión sencilla.

Autocontrol

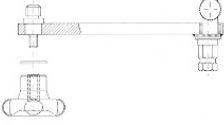
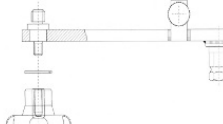

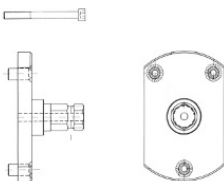





Con el brazo compensador y la cesta de pesos incluidos, la unidad se puede controlar a sí misma. El Calibrator 2000 se suministra de serie con una caja de herramientas con adaptadores para calibrar todos los ergómetros actuales de Lode (excepto los ergómetros de RM). El Calibrator se suministra con la versión más actual del software de Windows.

Portable Calibrator Ultra

Calibración sencilla y eficaz de los ergómetros



Portable Calibrator Ultra can a.o be extended with the following options:

<p>Adaptador universal para bielas sin enganche Calibrar varios ergómetros</p>  <p>Número de parte:</p>	<p>Adaptador universal para bielas de rosca de 1/2" Calibrar varios ergómetros</p>  <p>Número de parte:</p>	<p>Adaptador para biela con enganche Calibrar varios ergómetros</p>  <p>Número de parte:</p>	<p>Adaptador para biela Dynavit Calibrar varios ergómetros</p>  <p>Número de parte:</p>	<p>Convertidor serie a USB Conexión sencilla</p>  <p>Número de parte:</p>
<p>Pasadores de seguridad, juego de 15 Más pasadores de seguridad de repuesto</p>  <p>Número de parte:</p>	<p>Adaptador Isis m8x1 Calibrar varios ergómetros</p>  <p>Número de parte:</p>	<p>Cable RS232 Conexión sencilla</p>  <p>Número de parte:</p>	<p>Maletín para el Calibrator Ultra / Versa Transporte seguro</p>  <p>Número de parte:</p>	

Portable Calibrator Ultra

Calibración sencilla y eficaz de los ergómetros



Especificaciones

Carga de trabajo

Velocidad rotacional máxima a 110 V	120 rpm
Velocidad rotacional mínima	25 rpm
Velocidad rotacional máxima	180 rpm
Dirección de rotación en sentido horario	✓
Dirección de rotación en sentido contrario a las a	✓
Par máximo del motor	100 Nm
Par máximo del sensor	100 Nm
Tiempo de calentamiento	5 min
Rango de potencia aprobado (máximo)	1000 W
Rango de potencia aprobado (mínimo)	0 W
Rango de potencia al máximo de rpm (máximo)	1500 W
Rango de potencia al máximo de rpm (mínimo)	0 W
Incluye adaptador para biela	✓

Precisión

Exactitud de la velocidad	0.25 %
Error de precisión de la potencia > 100 W	1 %
Error de precisión de la potencia hasta 100 W	1 W
Resolución del par	0.05 Nm
Tiempo de resolución	10 ms
Precisión del ajuste de las rpm	0.1 rpm
Resolución de las rpm	0.05 rpm

Interfaz de usuario

Software disponible en inglés	✓
Software disponible en alemán	✓
Software disponible en holandés	✓
Software disponible en japonés	✓

Conectividad

Conexión USB	✓
--------------	---

Dimensiones

Longitud del cable	3000 mm	118.1 inch
Longitud del equipo (cm)	52 cm	20.5 inch
Anchura del equipo (cm)	32 cm	12.6 inch
Altura del equipo	52 cm	20.5 inch
Peso del equipo	29 kg	63.9 lbs

Alimentación

	14 A
	15 A
Fases	1
Frecuencia	50/60 Hz

Información del pedido

Número de parte: 919950

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Normativa y seguridad

Parada de emergencia integrada ✓

Requisitos mínimos del sistema

RAM interno 4000 MB

Espacio mínimo disponible del disco duro 25 GB

Número de puertos USB libres 2

Compatibilidad

Válido para todas las marcas ✓

Válido para ergómetros de gran potencia ✓

Microsoft Windows 10 ✓

Elementos incluidos

Incluye software para PC ✓